

# VEO

## Der Maßstab für Bildschirmlesegeräte



Das Bildschirmlesesystem VEO bietet höchsten Lese- und Bedienkomfort. VEO überzeugt durch innovative Technik, nutzerfreundliche Bedienung und Qualität made in Germany.









Die FullHD+ Kamera vergrößert Geschriebenes ca. 1 bis über 100fach und garantiert ein kontrastreiches,

flimmerfreies Bild. Die NELE-Technologie\* minimiert Reflexionen und Schatten. Das bietet zahlreiche Vorteile – insbesondere beim Betrachten glänzender Vorlagen und beim Schreiben.


Die abnehmbare 3-Knopf-Funk-Bedieneinheit garantiert eine einfache und komfortable Steuerung Ihres VEOs.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- FullHD+ Kamera mit 18fachem optischem Zoom; gestochen scharfes Bild auch bei hohem Zoomfaktor
- LVHD-Technologie für kontrastreiches, flimmerfreies Bild in FullHD+ Qualität
- NELE-Technologie (Natürliches-Evolutionäres-Licht-Erlebnis) reduziert Schatten und Blendungen – auch bei hochglänzenden Vorlagen
- rahmenloser 24“-LED-Flachbildmonitor, stufenlos neig- und schwenkbar, um 90° drehbar
- 1 bis 111fache Vergrößerung
- Darstellung einer ganzen DIN A4 Seite
- komfortable Lesehaltung durch stufenlos verstellbaren Monitor
- frei beweglicher Kreuztisch, unabhängig horizontal und vertikal bremsbar
- abnehmbare Funk-Bedieneinheit, sichere Platzierung unterhalb des Monitors oder seitlich am Kreuztisch
- energiesparend, recycelbar, umweltfreundlich, made in Germany

<b>VEO</b>		HiMi-Nummer: 25.21.85.0003
	LED Flachbildmonitor 24"-Klasse   ca. 61 cm (1920x1080 px) Komfort-Autofokus, abschaltbar Monitor stufenlos höhenverstellbar, neigbar, drehbar, um 90° rotierbar	
	Vario Kamera: Full HD+ Kamera mit optischem Zoom	
	Vergrößerung: ca. 1 - 111 fach	
	Echtfarben, Fehlfarben:  benutzerdefinierte Fehlfarbmodi	
	Gewicht ca. 12 kg Maße (B x H x T) 54 cm x 64 cm x 56 cm	
	Lieferumfang: Netzteil mit Kabel, Gebrauchsanweisung	
	Zubehör (optional): Kreuztisch, Untergestell	

Monitor um 90° drehbar, um  
z.B. Zeitungsspalten zu lesen

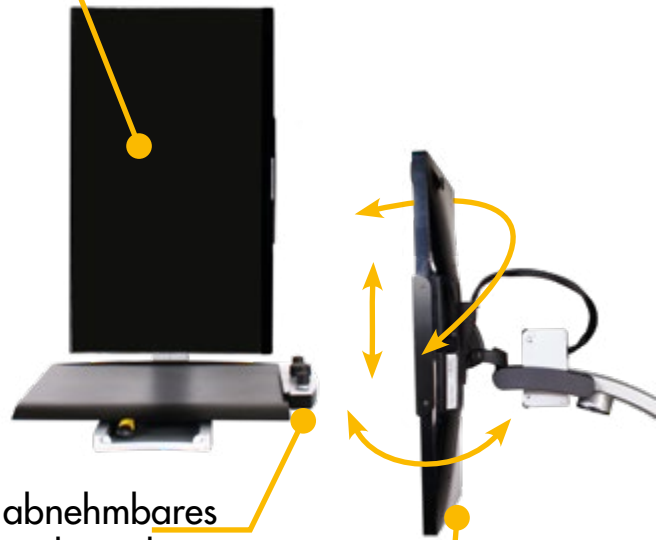

abnehmbares  
Bedienteil  
Monitor in alle Richtungen  
stufenlos frei beweglich



intuitive  
3-Knopf-  
Bedienung

leichtgängiger Kreuz-  
tisch mit Feststellhebel

NELE-Technologie  
reduziert Blendreflexe



**Reinecker Vision GmbH**  
Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein

**Tel. 06257 9311-0**

Fax 06257 9311-8008  
info@reineckervision.de  
www.reineckervision.de

**Wir sind bundesweit für Sie da:**  
kostenfreie Beratung vor Ort  
oder in unseren Beratungsstellen

