

# mezzo

## Das kompakte Bildschirmlesesystem



Ob als kompaktes Bildschirmlesesystem oder als klassisches Bildschirmlesesystem mit Kreuztisch, mezzo überzeugt durch gestochen scharfe, hochauflösende Bilder und hohe Nutzerfreundlichkeit.

Die FullHD Kamera vergrößert Geschriebenes bei bester Bildqualität, minimalem Bildrauschen und reduzierter Reflexion auf glänzenden Oberflächen. Der Schattenwurf der Hand beim Schreiben ist deutlich verringert.





Der hochauflösende LED-Flachbildmonitor ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Er ist stufenlos verstellbar und lässt sich, dank Federkompensation, einfach positionieren. Die kompakte Bauweise und der praktische Klappmechanismus sorgen dafür, dass Sie mezzo bei Bedarf mühelos transportieren sowie auf- und abbauen können. In Kombination mit einem der optional erhältlichen Kreuztische steigern Sie den Nutzungskomfort zusätzlich.


### Ihre Vorteile auf einen Blick

- **LVHD**-Technologie für kontrastreiches, flimmerfreies Bild in FullHD Qualität
- hochauflösender LED-Flachbildmonitor in zwei Größen: 20"- und 24"-Klasse (ca. 49/60 cm)
- reduzierter Schattenwurf der Hand beim Schreiben
- Komfort-Autofokus: automatische Einstellung der bestmöglichen Bildschärfe
- beweglicher Monitor mit Federkompensation für komfortable Lesehaltung und einfaches Positionieren
- müheloser Auf- und Abbau dank einfachem Klappmechanismus
- intuitive 3-Knopf-Bedienung

### Die Focus-Kamera

- FullHD-Kamera mit digitalem Zoom
- Vergrößerung ca. 2,6 bis 45fach (abhängig von Monitorgröße, Ausstattung und Einstellungen)
- gestochen scharfes Bild auch bei kleinem Zoomfaktor

	<b>mezzo</b>	HiMi-Nummer: 25.21.85.3002/0002
	LED Flachbildmonitor 20"-Klasse   ca. 49 cm (1600x900 px) 24"-Klasse   ca. 60 cm (1920x1080 px) Komfort-Autofokus, abschaltbar	
	<b>Focus Kamera:</b> FullHD Kamera mit digitalem Zoom	
	<b>20"-Klasse:</b> ca. 2,6 bis 30fach* <b>24"-Klasse:</b> ca. 3,8 bis 45fach* *Werkseinstellung, erweiterter Vergrößerungsbereich im Menü einstellbar	
	Echtfarben, Fehlfarben: <b>F F F F F</b> benutzerdefinierte Fehlfarbmodi	
	<b>20"-Klasse:</b> Gewicht ca. 6,2 kg Maße (B x H x T) aufgebaut/zusammengeklappt ca. 46 x 50 x 52 cm/46 x 18 x 52 cm	
	<b>24"-Klasse mit Kreuztisch:</b> Gewicht ca. 10,5 kg Maße (B x H x T) aufgebaut/zusammengeklappt ca. 53 x 53 x 52 cm/53 x 22 x 52 cm	
	Lieferumfang: Netzteil mit Kabel, Gebrauchsanweisung	
	Zubehör (optional): Kreuztisch, Tragetasche	

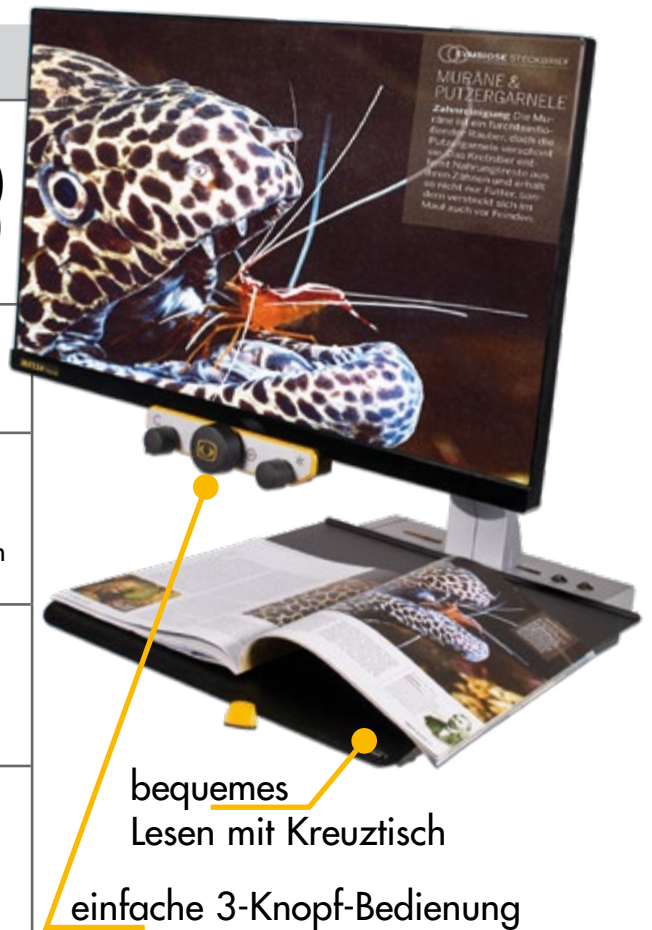

**Reinecker Vision GmbH**  
Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein

**Tel. 06257 9311-0**

Fax 06257 9311-8008  
info@reineckervision.de  
www.reineckervision.de

**Wir sind bundesweit für Sie da:**  
kostenfreie Beratung vor Ort  
oder in unseren Beratungsstellen

